



- ✓ 獨有Aquaform™鏡片處理技術，令鏡片能天然鎖緊水份
- ✓ 第三代矽水凝膠鏡片，更柔軟舒適
- ✓ 真正非球面鏡片設計，造就更清晰視野

AVAIRA® 產品規格

直徑 Diameter	14.2mm
中心厚度 Center Thickness	0.08mm at -3.00D
基弧 Base Curve	8.5mm
原料 Material	enfilcon A UV blocker ¹ 有效阻截紫外光，保護眼睛
含水量 Water Content	46%
供應度數 Power Range	-0.25D to -6.00D (0.25D steps) -6.50D to -12.00D (0.50D steps)
顏色 Tint	Sofblue® 淺藍色
配戴期 Wear Schedule	日戴型 Daily Wear
轉換期 Replacement Schedule	兩星期拋棄型 Two Week Disposable
透氧量 Dk/t	125 at -3.00D
鏡片設計 Lens Design	真正非球面及圓滑邊緣設計 Aspheric front surface & rounded edge

¹ 注意：具備吸收紫外光功能的隱形眼鏡不能完全覆蓋眼睛及眼部周圍，因此不能代替具備吸收紫外光功能的保護性眼鏡，例如吸收紫外光的護目鏡或太陽眼鏡。

想了解更多有關 AVAIRA® 的產品資訊
請向店內眼科視光師查詢



CooperVision®
A CLEARER VISION

以頂尖技術成就專業地位

CooperVision為全球三大隱形眼鏡製造商之一，數十多年來，致力發展隱形眼鏡的生產技術，以多項領先科技穩據業界地位，為配戴隱形眼鏡的人士提供突破性的舒適感之餘，亦受從事眼睛護理的專業人士所信賴。

客戶服務熱線：3718 0699
www.coopervision.com.hk

AVAIRA®

兩星期拋棄型隱形眼鏡



最天然的鎖水濕潤
超乎想像的柔軟舒適



CooperVision®
A CLEARER VISION

隆重介紹唯一提供天然濕潤、 第三代矽水凝膠兩星期拋棄型隱形眼鏡 AVAIRA®

卓越品質，帶給您前所未有的舒適感覺！



獨有Aquaform™技術， 提供自然濕潤

先進鏡片物料能天然鎖緊及保存水份，無須表面處理、添加劑或潤滑劑，更能減少鏡片上的沉澱物，配戴感覺份外舒適



鏡片更柔軟

Avaira鏡片較市場上其他優質的兩星期矽水凝膠隱形眼鏡柔軟度高出30%



高透氧量

能為雙目提供比日常需要更為充裕的氧氣量 (Dk/t = 125)，有助保持眼睛角膜健康



先進鏡片設計

極致背面及圓滑邊緣設計，令鏡片驗配更容易，配戴時更感輕鬆舒適




真正非球面設計

獨特的非球面光學設計，有效減低鏡片及眼球表面的像差，造就更準確清晰的視野



阻隔紫外光功能


保護眼睛，免受紫外光侵害*

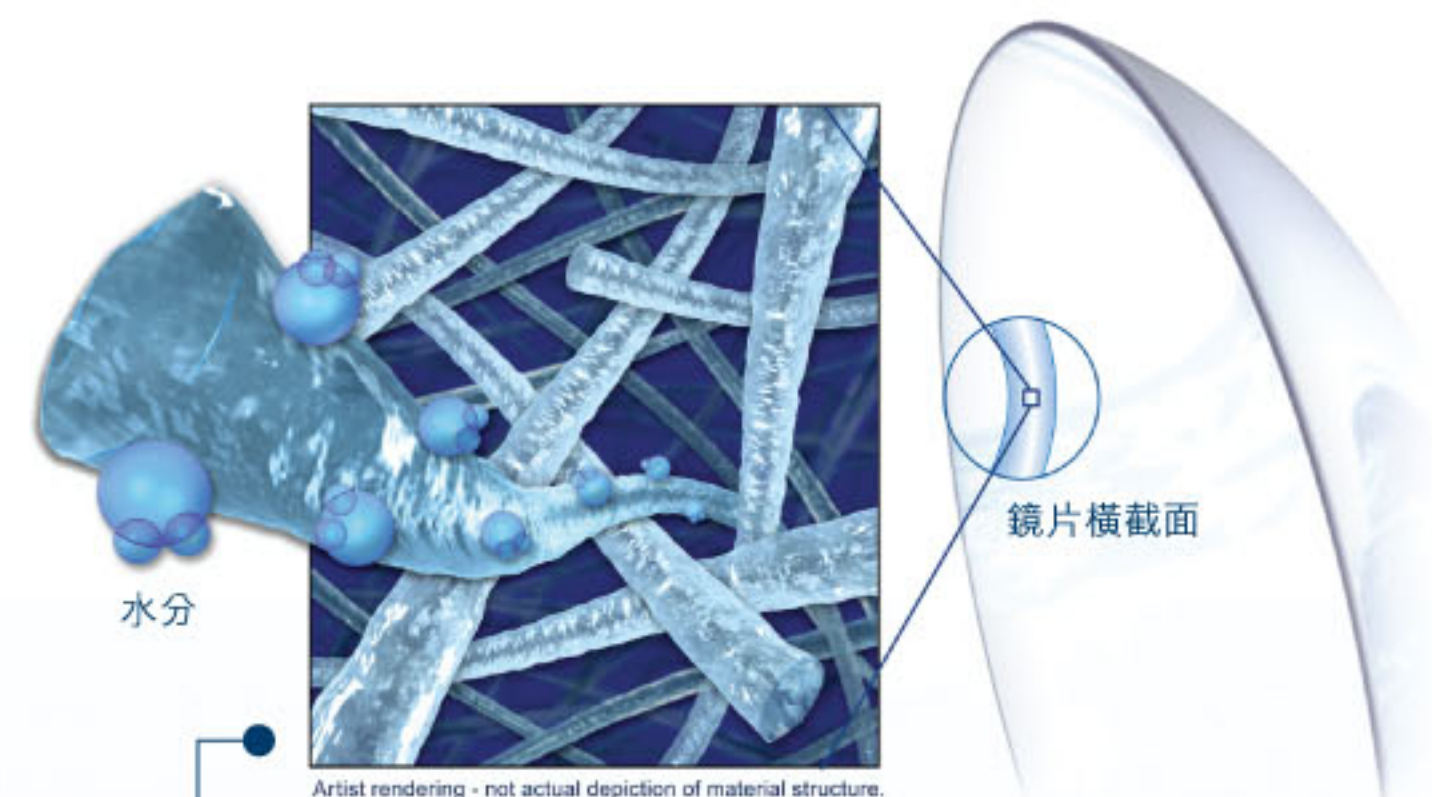


經Aquaform™技術處理過的鏡片能吸收及黏合周圍的水分子，持續保持濕潤

Aquaform™突破性鏡片處理技術

- 令鏡片能吸收及黏合周圍的水分子，營造天然濕潤
- 有效保存鏡片水份，減少水份流失
- 鏡片無須加上添加劑、塗層、濕潤劑或經表面處理
- 有效減少鏡片表面上的沉澱物，帶來無比持久的舒適

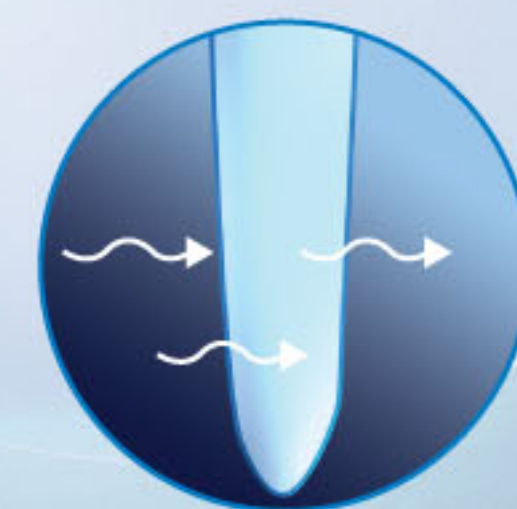

高度透氧

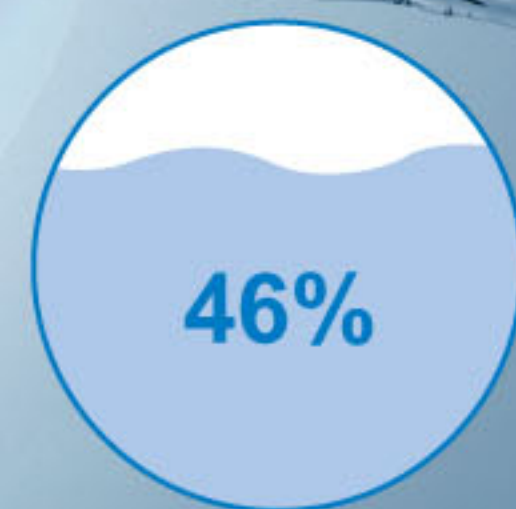

更高水份含量