



請向店內的驗光師查詢更多有關
proclear® 1 day 的產品資訊

proclear® 1 day 產品規格

直徑 Diameter	14.2mm
中心厚度 Center Thickness	0.09mm @-3.00 DS
邊緣厚度 Edge Thickness	0.07mm 圓邊設計 round edge design
基弧 Base Curve	8.7mm
原料 Material	Omafilcon A (PC Hydrogel)
含水量 Water Content	60%
供應度數 Power Range	-0.50D ~ -1.000D
顏色 Tint	淺藍 Light Blue
配戴期 Wear Schedule	日戴型 Daily Wear
轉換期 Replacement Schedule	每日拋棄型 Daily Disposable
透氧量	36.6 @-3.00 D
使用模式	每日拋棄型



以頂尖技術成就專業地位

CooperVision為全球三大隱形眼鏡製造商之一，數十多年來，致力發展隱形眼鏡的生產技術，以多項領先科技穩據業界地位，為配戴隱形眼鏡的人士提供突破性的舒適感之餘，亦受從事眼睛護理的專業人士所信賴。

客戶服務熱線：3718 0699
www.proclear.com.hk

科研權威 專業之選

獲美國FDA認證*

proclear® 1 day
隱形眼鏡

讓雙目全日濕潤舒適



* Proclear XC and Proclear 1Day (omafilcon A) Soft (hydrophilic) Contact lenses may provide improved comfort for contact lens wearers who experience mild discomfort or symptoms related to dryness during lens wear associated with Evaporative Tear Deficiency or from Aqueous Tear Deficiency (non-Sjogren's only).

proclear® 1 day 隱型眼鏡 打造全日舒適新定義

隱型眼鏡每天長時間與眼球表面接觸，因此完美的隱形眼鏡，除了能為配戴者帶來清晰的視覺功能外，還有彷彿如無物的天然舒適感。市面上很多的隱形眼鏡都以鏡片濕潤作為賣點，但因技術所限，濕潤感覺往往不能持久，早上配戴，只要過了一段時間，雙眼乾澀不適的徵狀便會逐漸浮現。

proclear® 1 day 正針對這普遍問題，提供革命性的改善方案。proclear® 1 day 無論於生產科技、鏡片成份以至鏡片設計方面均糅合了最先進的生理相容技術，能有效保持眼睛全日濕潤舒適，是每天需要長時間配戴隱形眼鏡人士的不二之選！

獲FDA認證*配戴感覺更舒適

proclear® 1 day 隱形眼鏡榮獲美國食品藥物管理局(FDA-510K-KO61948)認證：「proclear能為配戴鏡片時因乾澀而引起輕度不適的隱形眼鏡使用者提供更舒適的感覺。」

* Proclear XC and Proclear 1Day (omafilcon A) Soft (hydrophilic) Contact lenses may provide improved comfort for contact lens wearers who experience mild discomfort or symptoms related to dryness during lens wear associated with Evaporative Tear Deficiency or from Aqueous Tear Deficiency (non-Sjogren's only).




美國FDA Approval 証照

與市面上其他牌子比較


1. proclear® 1 day 鏡片持續被評比為較舒適的全天配戴鏡片。
2. 重新配鏡時，92%使用者選擇繼續配戴 proclear® 1 day 鏡片，而不選擇原先使用品牌。
3. proclear® 1 day 讓使用者感受到眼睛較濕潤以及配戴時間增長的良好體驗。
4. proclear® 1 day 鏡片提供眼睛安全需求雙倍的透氧率。

鏡片水分流失狀況一覽表

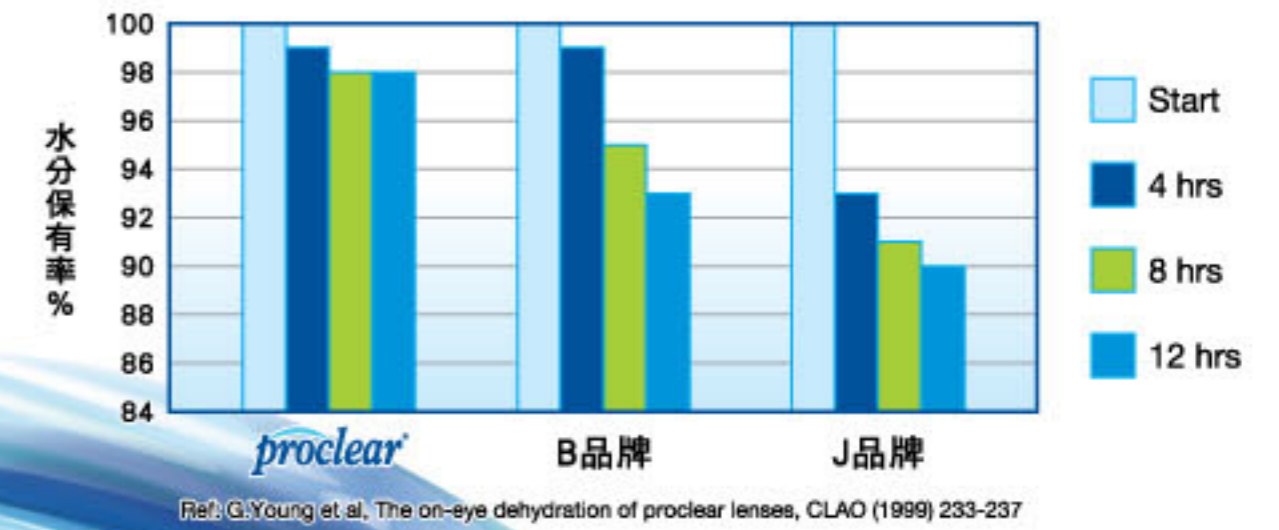


革命性PC Technology™

採用PC Technology™革新專利技術製成的鏡片，內裡所含的PC分子(phosphorylcholine molecules)，一如人體細胞內的天然物質，具有極佳的親水特性，能自然地與淚水結合，並在鏡片表面形成保濕膜，全日滋潤眼睛解決乾澀問題，給你最舒適的配戴感覺。

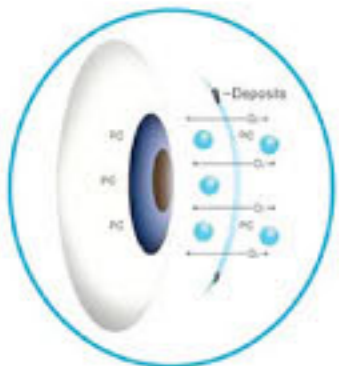

配戴Proclear鏡片

- 採用PC Technology™
- 乾燥度極低
- 維持高透氧
- 減少沉澱物

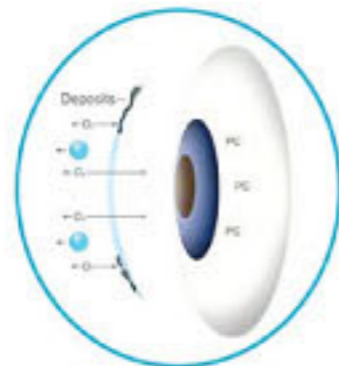

配戴一般鏡片

- 無採用PC Technology™
- 令眼睛乾燥
- 透氧度減少
- 積累沉澱物



極致鏡片設計

proclear® 1 day 採用獨特的鏡片設計，提供最佳的視覺效果和無可比擬的舒適感覺。

專利圓滑邊緣設計

proclear® 1 day 隱形眼鏡的邊緣特別圓滑，比一般鏡片更容易配戴及卸除，有效減低對眼球表面的刺激。此外，鏡片外圍的扁平設計更能配合眼球弧度，讓配戴時加倍舒適自然。



真正非球面鏡片設計

proclear® 1 day 隱形眼鏡採用先進的非球面鏡片設計，有效同時改善鏡片及眼球表面的像差，造就更準確、更清晰的視野。



CooperVision®
 科研權威 專業之選